


Único, patentado


Strip oscilante diamantado que permite un tratamiento seguro evitando la creación de escalones y la abrasión de la dentina

Gracias al revestimiento en diamante en la zona operativa central,

Intensiv Ortho-Strips System, Central permite una alta precisión en la reducción, el acabado y el pulido proximal del esmalte respetando la morfología original y los tejidos dentales.

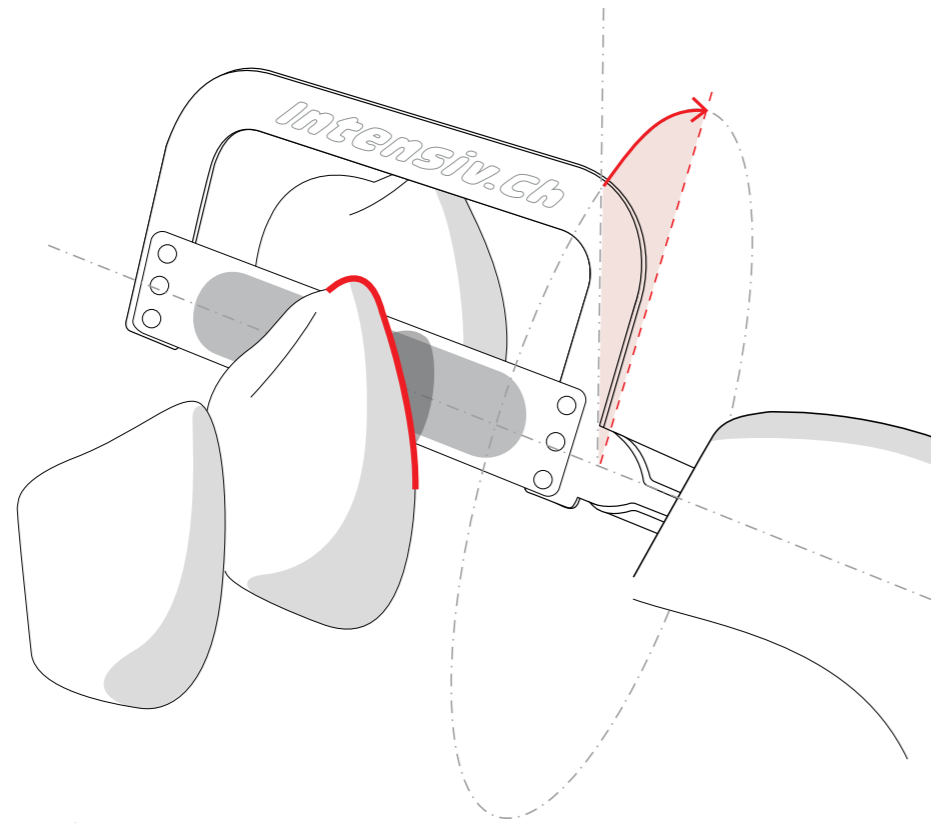

Durante el proceso de reducción, acabado y pulido del esmalte en Ortodoncia (Stripping) puede ocurrir de crear un escalón cervical o eliminar involuntariamente la dentina en el área bajo ecuatorial del diente, provocando en el paciente una probable sensibilidad dental siguiente.

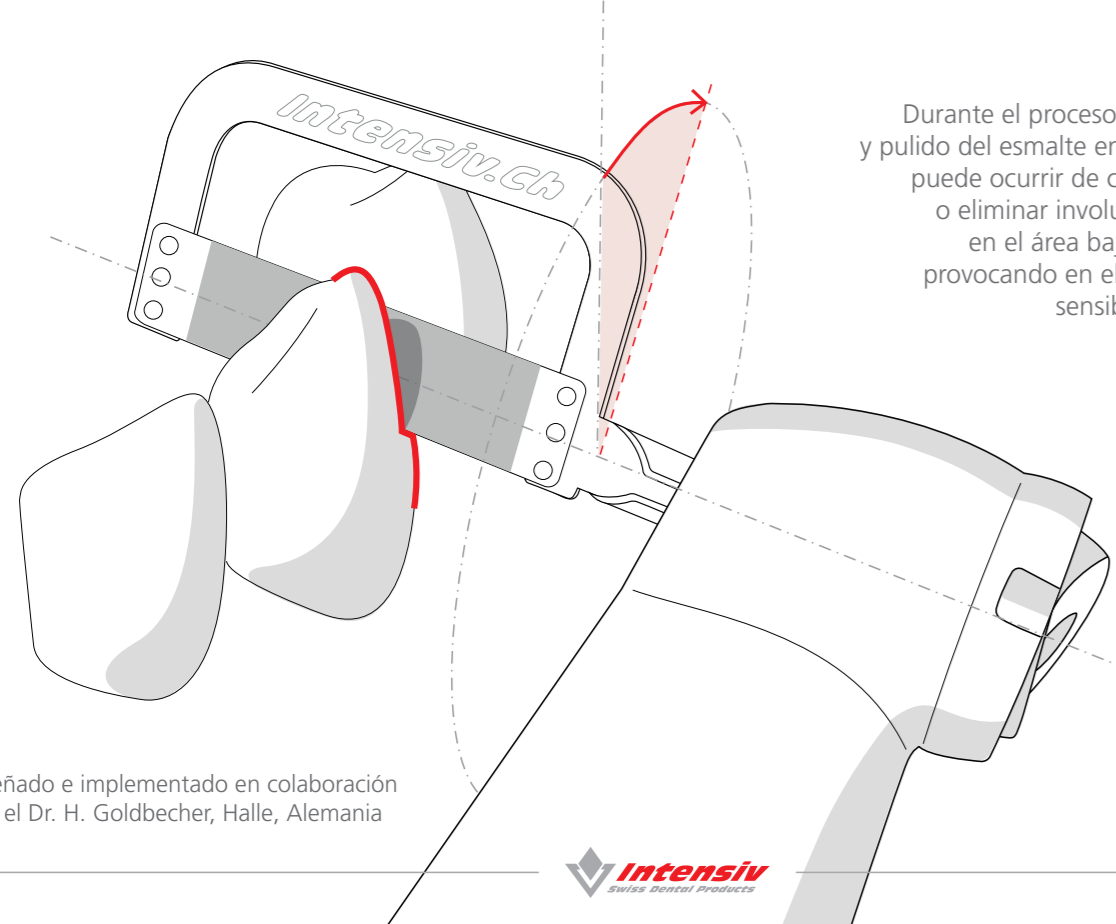

Diseñado e implementado en colaboración con el Dr. H. Goldbecher, Halle, Alemania



Intensiv Ortho-Strips® System

Pedido por tel: +41 91 986 50 50 o por e-Mail: customer.care@intensiv.ch

Producto	REF	Precio de venta recomendado	Cant.
Embalajes por 3 Strips:			
Intensiv Ortho-Strips System, Central, Double-Sided, Coarse, 60µm	OS60C-CEN-DS/3		
Intensiv Ortho-Strips System, Central, Double-Sided, Medium, 40µm	OS40M-CEN-DS/3		
Intensiv Ortho-Strips System, Central, Double-Sided, Fine, 25µm	OS25F-CEN-DS/3		
Intensiv Ortho-Strips System, Central, Double-Sided, Polishing, 15µm	OS15POL-CEN-DS/3		
6 Strips surtidos:			
Intensiv Ortho-Strips System, Central, One-Sided right, Coarse, 60µm	OS60C-CEN-R/3		
Intensiv Ortho-Strips System, Central, One-Sided right, Medium, 40µm	OS40M-CEN-R/3		
Intensiv Ortho-Strips System, Central, One-Sided right, Fine, 25µm	OS25F-CEN-R/3		
Intensiv Ortho-Strips System, Central, One-Sided right, Polishing, 15µm	OS15POL-CEN-R/3		
Intensiv Ortho-Strips System, Central, One-Sided left, Coarse, 60µm	OS60C-CEN-L/3		
Intensiv Ortho-Strips System, Central, One-Sided left, Medium, 40µm	OS40M-CEN-L/3		
Intensiv Ortho-Strips System, Central, One-Sided left, Fine, 25µm	OS25F-CEN-L/3		
Intensiv Ortho-Strips System, Central, One-Sided left, Polishing, 15µm	OS15POL-CEN-L/3		
Intensiv Ortho-Strips System, Double-Sided, Opener, 8µm	OS08OP-DS/3		
Intensiv Ortho-Strips System, Double-Sided, Medium, 40µm	OS40M-DS/3		
Intensiv Ortho-Strips System, Double-Sided, Coarse, 60µm	OS60C-DS/3		
Intensiv Ortho-Strips System, Double-Sided, Extracoarse, 80µm	OS80XC-DS/3		
Intensiv Ortho-Strips System, Double-Sided, Fine, 25µm	OS25F-DS/3		
Intensiv Ortho-Strips System, Double-Sided, Polishing, 15µm	OS15POL-DS/3		
Intensiv Ortho-Strips System OP, XC & 4 Central Double-Sided	OSSetCEN02/6		
Intensiv Ortho-Strips System OP, XC & Central Left-Sided	OSSetCEN02L/6		
Intensiv Ortho-Strips System OP, XC & Central Right-Sided	OSSetCEN02R/6		
Intensiv Ortho-Strips System, Double-Sided Set, 6 strips surtidos	OSSet02/6		
Intensiv Ortho-Strips System, Left-Sided Set, 6 strips surtidos	OSSet02L/6		
Intensiv Ortho-Strips System, Right-Sided Set, 6 strips surtidos	OSSet02R/6		
Intensiv Swingle, W&H Synea, sin luz	WG-69 A		
Intensiv Swingle, W&H Synea, con luz	WG-69 LT		
Intensiv Ortho-Strips Tray	OST400		
Intensiv IPR-DistanceControl Set - 8 piezas surtidas	IPR-DC SET		



CONSULTA AUTOMÁTICA POR CORREO ELECTRÓNICO

Envíenme el Catálogo Intensiv

Proveedor habitual	
Clinica Dental	Fecha
	Firma

Intensiv SA
Via al Molino 107
6926 Montagnola
Suiza
Tel. +41 91 986 50 50
info@intensiv.ch
www.intensiv.ch



Intensiv Ortho-Strips® System

Sistema de strips diamantados oscilantes: Eficiente, preciso y seguro para los tratamientos clínicos IPR (InterProximal Reduction) en Ortodoncia



PAT. EP15201863.6

Intensiv Ortho-Strips System, Central



Introducción facilitada



Prevención de los escalones cervicales

Imágenes clínicas:
Dr. F. Garino, Turín, Italia



Intensiv Ortho-Strips® System, Central


PAT. EP115201863.6

Innovadores strips oscilantes diamantados en el área operativa central

Intensiv Ortho-Strips System, Central Double-Sided



- Strips diamantados en los dos lados con bordes libres de diamante para 0.5 mm, superior e inferior
- En 4 granulometrías diferentes:
 - 60µm, marrón, Coarse, para la reducción del esmalte proximal
 - 40µm, rojo, Medium, para el modelado de las superficies tratadas
 - 25µm, blanco, Fine, para el acabado de las superficies tratadas
 - 15µm, amarillo, Polishing, para el pulido de las superficies tratadas

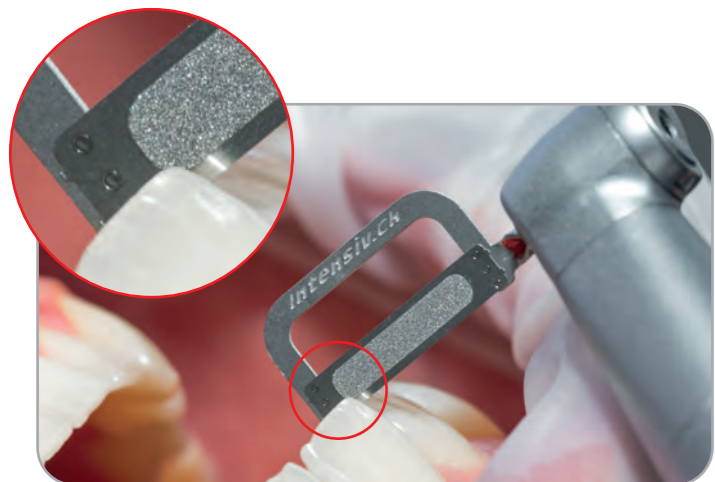

Introducción facilitada del strip gracias al borde inferior no diamantado

Intensiv Ortho-Strips System, Central One-Sided



- Strips diamantados en un solo lado con bordes libres de diamante para 0.5 mm, superior e inferior
- En 4 granulometrías diferentes: 60µm, 40µm, 25µm, 15µm (como en la versión Double-Sided)
- Disponibles las variantes:
 - "L", left (lado izquierdo)
 - "R", right (lado derecho)

Left Right



Prevención de la formación del escalón cervical, gracias al borde inferior no diamantado del strip



Modelado del esmalte con Intensiv Ortho-Strips System, Central, Medium, Ref. OS40M-CEN-DS, 40µm




Acabado del esmalte con Intensiv Ortho-Strips System, Central, Polishing, Ref. OS15POL-CEN-DS, 15µm

Imágenes clínicas:
Dr. F. Garino, Turín, Italia

Intensiv Ortho-Strips® System, Central

PAT. EP115201863.6

El arco ligeramente plegable permite la adaptación del strip a la anatomía dental horizontal y la adaptación a las superficies dentales opuestas

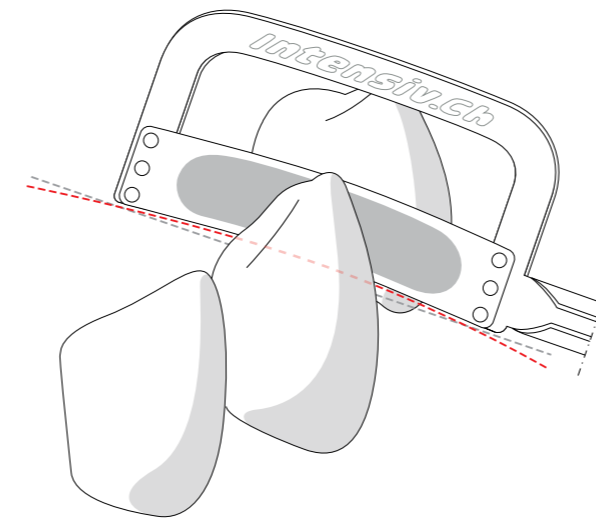

Indicaciones

- Reducción, acabado y pulido del esmalte proximal en Ortodoncia

Ventajas

- Introducción facilitada entre los puntos de contacto interdientales
- Prevención de la formación de los escalones cervicales
- La hipersensibilidad dental no es favorecida.
- Mantenimiento de la morfología original ecuatorial del diente
- Reutilizable

Descripción del producto

- Strips oscilantes diamantados en el área operativa central
- 4 granulometrías diferentes:
 - 60µm, marrón, Coarse, para la reducción del esmalte proximal
 - 40µm, rojo, Medium, para el modelado de las superficies tratadas
 - 25µm, blanco, Fine, para el acabado de las superficies tratadas
 - 15µm, amarillo, Polishing, para el pulido de las superficies tratadas
- Espesor del strip no diamantado: 0.05 mm
- Altura total del strip: 3.7 mm
- Altura del área diamantada: 2.7 mm
- Longitud del área diamantada: 13 mm
- Esterilizables


Intensiv IPR-Distance Control

Instrumento manual de acero inoxidable para la medida y el control de la distancia creada entre los dientes durante el procedimiento IPR.



Intensiv Ortho-StripsTray

Bandeja de acero inoxidable compacta con silicones coloreados para el depósito y la protección de los strips oscilantes Intensiv Ortho-Strips System.

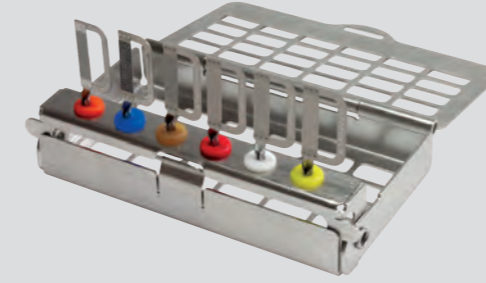

Intensiv Ortho-Strips® System

Universidad de Zúrich, Suiza

Strips diamantados oscilantes para la reducción, l'acabado y el pulido proximal del esmalte en Ortodoncia (IPR)

Intensiv Ortho-Strips System Double-Sided



- Strips diamantados en los dos lados
- En 6 granulometrías diferentes:
 - 8µm, naranja, Opener, apertura de los puntos de contacto
 - 60µm, marrón, Coarse, para la reducción del esmalte proximal
 - 80µm, azul, Extracoarse, creación del espacio, alta eficiencia de reducción
 - 40µm, rojo, Medium, para el modelado del esmalte proximal
 - 25µm, blanco, Fine, para el acabado de las superficies tratadas
 - 15µm, amarillo, Polishing, para el pulido de las superficies tratadas



Reducción del esmalte y creación del espacio con Intensiv Ortho-Strips System, Extracoarse, Ref. OS80XC-DS, 80µm

Intensiv Ortho-Strips System One-Sided



- Strips diamantados en un solo lado
- En 6 granulometrías diferentes: 8µm, 40µm, 60µm, 80µm, 25µm, 15µm (como en la versión Double-Sided)
- Disponibles las variantes:
 - "L", left (lado izquierdo)
 - "R", right (lado derecho)

Left Right



Pulido de las superficies tratadas con Intensiv Ortho-Strips System, Polishing, Ref. OS15POL-DS, 15µm

Intensiv Swingle®

Clínicamente testado por las Universidades de Zúrich y Berna, Suiza. Contra-ángulo recíproco para la utilización de Intensiv Ortho-Strips System.



- 2 funciones en un solo contra-ángulo con micro mecanismo activado al botón en la parte posterior de la cabeza, par elegir entre la rotación axial libre o la posición axial fija de Intensiv Ortho-Strips System
- 20.000 oscilaciones por minuto
- Disponible sin o con luz integrada
- 2 años de garantía
- Esterilizable