


Unico, brevettato

Strip oscillante diamantato che consente un trattamento sicuro evitando la creazione di gradini e l'abrasione della dentina

Grazie al rivestimento di diamante nella zona operativa centrale,

Intensiv Ortho-Strips System, Central consente una elevata precisione nella riduzione, rifinitura e lucidatura approssimale dello smalto rispettando la morfologia originaria e i tessuti dentali.

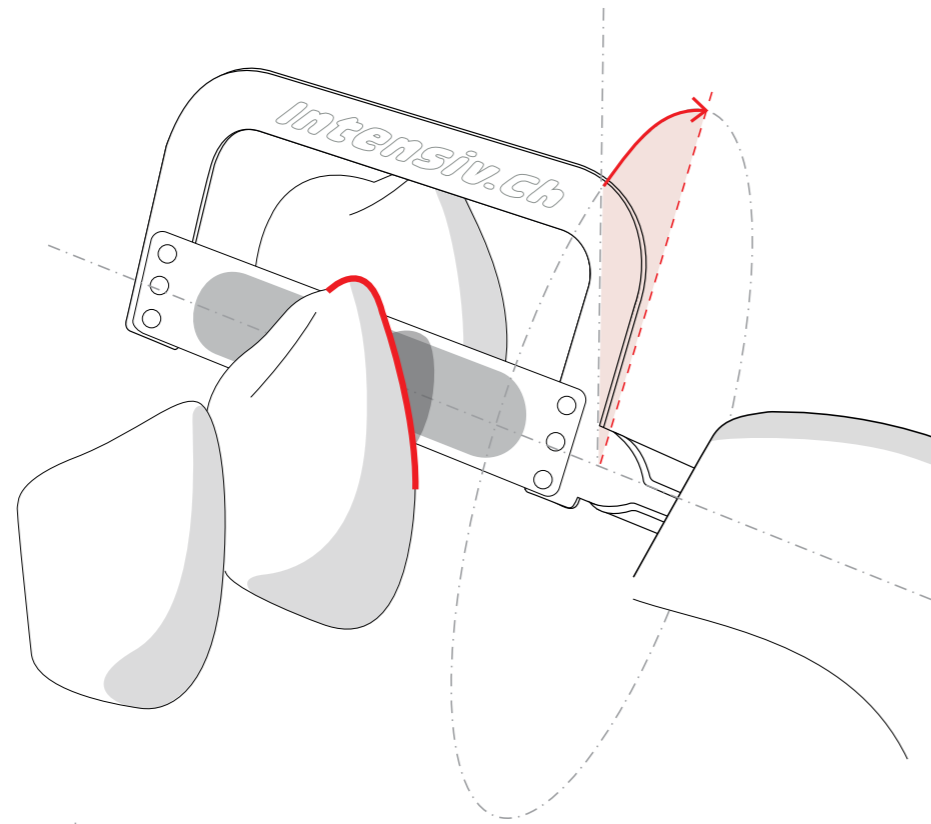

Durante il processo di riduzione, rifinitura e lucidatura dello smalto in Ortodonzia (Stripping) può capitare che si crei un gradino cervicale o che si elimini involontariamente dentina nell'area sotto equatoriale del dente, provocando nel paziente una probabile successiva sensibilità dentale.

Ideato e realizzato in collaborazione con il Dr. H. Goldbecher, Halle, Germania



# Intensiv Ortho-Strips® System

Ordine per tel: +41 91 986 50 50 o per e-mail: customer.care@intensiv.ch

Prodotto	REF	Prezzo raccomandato	Qt.
<b>Confezioni da 3 strips:</b>			
Intensiv Ortho-Strips System, Central, Double-Sided, Coarse, 60µm	OS60C-CEN-DS/3		
Intensiv Ortho-Strips System, Central, Double-Sided, Medium, 40µm	OS40M-CEN-DS/3		
Intensiv Ortho-Strips System, Central, Double-Sided, Fine, 25µm	OS25F-CEN-DS/3		
Intensiv Ortho-Strips System, Central, Double-Sided, Polishing, 15µm	OS15POL-CEN-DS/3		
Intensiv Ortho-Strips System, Central, One-Sided right, Coarse, 60µm	OS60C-CEN-R/3		
Intensiv Ortho-Strips System, Central, One-Sided right, Medium, 40µm	OS40M-CEN-R/3		
Intensiv Ortho-Strips System, Central, One-Sided right, Fine, 25µm	OS25F-CEN-R/3		
Intensiv Ortho-Strips System, Central, One-Sided right, Polishing, 15µm	OS15POL-CEN-R/3		
Intensiv Ortho-Strips System, Central, One-Sided left, Coarse, 60µm	OS60C-CEN-L/3		
Intensiv Ortho-Strips System, Central, One-Sided left, Medium, 40µm	OS40M-CEN-L/3		
Intensiv Ortho-Strips System, Central, One-Sided left, Fine, 25µm	OS25F-CEN-L/3		
Intensiv Ortho-Strips System, Central, One-Sided left, Polishing, 15µm	OS15POL-CEN-L/3		
Intensiv Ortho-Strips System, Double-Sided, Opener, 8µm	OS08OP-DS/3		
Intensiv Ortho-Strips System, Double-Sided, Medium, 40µm	OS40M-DS/3		
Intensiv Ortho-Strips System, Double-Sided, Coarse, 60µm	OS60C-DS/3		
Intensiv Ortho-Strips System, Double-Sided, Extracoarse, 80µm	OS80XC-DS/3		
Intensiv Ortho-Strips System, Double-Sided, Fine, 25µm	OS25F-DS/3		
Intensiv Ortho-Strips System, Double-Sided, Polishing, 15µm	OS15POL-DS/3		
<b>6 strips assortiti:</b>			
Intensiv Ortho-Strips System OP, XC & 4 Central Double-Sided	OSSetCEN02/6		
Intensiv Ortho-Strips System OP, XC & Central Left-Sided	OSSetCEN02L/6		
Intensiv Ortho-Strips System OP, XC & Central Right-Sided	OSSetCEN02R/6		
Intensiv Ortho-Strips System, Double-Sided Set, 6 strips assortiti	OSSet02/6		
Intensiv Ortho-Strips System, Left-Sided Set, 6 strips assortiti	OSSet02L/6		
Intensiv Ortho-Strips System, Right-Sided Set, 6 strips assortiti	OSSet02R/6		
Intensiv Swingle, W&H Synea, senza luce	WG-69 A		
Intensiv Swingle, W&H Synea, con luce	WG-69 LT		
Intensiv Ortho-StripsTray	OST400		
Intensiv IPR-DistanceControl Set - 8 pezzi assortiti	IPR-DC SET		



**RICHIESTA AUTOMATICA PER E-MAIL**

Inviatemi p.f. il catalogo Intensiv

Fornitore abituale	
Studio Dentistico	Data
	Firma

Intensiv SA  
Via al Molino 107  
6926 Montagnola  
Svizzera

Tel. +41 91 986 50 50  
info@intensiv.ch  
www.intensiv.ch



# Intensiv Ortho-Strips® System

Sistema di strips diamantati oscillanti: Efficiente, preciso e sicuro per i trattamenti clinici IPR (InterProximal Reduction) in Ortodonzia



PAT. EP15201863.6

**Intensiv Ortho-Strips System, Central**



Introduzione semplificata



Prevenzione dei gradini cervicali

Immagini cliniche:  
Dr. F. Garino, Torino, Italia



# Intensiv Ortho-Strips® System, Central


PAT. EP115201863.6

Innovativi strips oscillanti diamantati nella zona operativa centrale

## Intensiv Ortho-Strips System, Central Double-Sided



- Strips diamantati da due lati con bordi liberi da diamante per 0.5 mm, superiore ed inferiore
- In 4 granulometrie differenti:
  - 60µm, marrone, Coarse, per la riduzione dello smalto approssimale
  - 40µm, rosso, Medium, per il contouring delle superfici trattate
  - 25µm, bianco, Fine, per la rifinitura delle superfici trattate
  - 15µm, giallo, Polishing, per la lucidatura delle superfici trattate

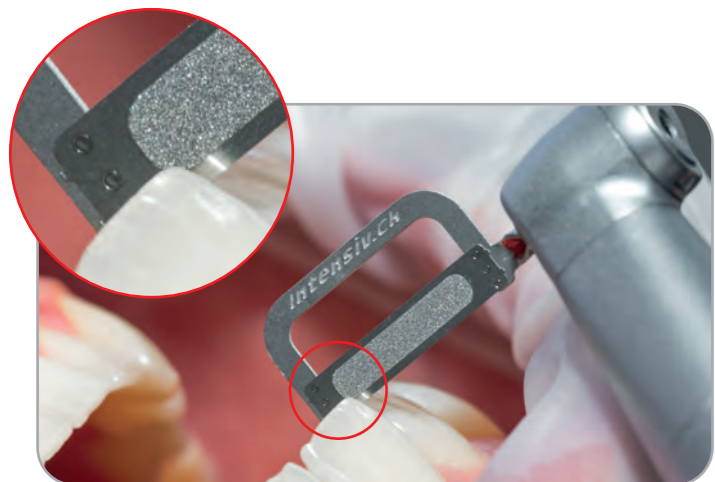

Introduzione semplificata dello strip grazie al bordo inferiore non diamantato



Contouring dello smalto con Intensiv Ortho-Strips System, Central, Medium, Ref. OS40M-CEN-DS, 40µm

Immagine cliniche:  
Dr. F. Garino, Torino, Italia

## Intensiv Ortho-Strips System, Central One-Sided



Left

Right

- Strips diamantati da un solo lato, con bordi liberi da diamante per 0.5 mm, superiore ed inferiore
- In 4 granulometrie differenti: 60µm, 40µm, 25µm, 15µm (come nella versione Double-Sided)
- Disponibili nelle varianti:
  - "L", left (lato sinistro)
  - "R", right (lato destro)



Prevenzione della formazione del gradino cervicale grazie al bordo inferiore non diamantato dello strip




Lucidatura dello smalto trattato con Intensiv Ortho-Strips System, Central, Polishing, Ref. OS15POL-CEN-DS, 15µm

# Intensiv Ortho-Strips® System, Central

PAT. EP115201863.6

L'arco leggermente pieghevole permette l'adattamento dello strip all'anatomia dentale orizzontale e l'adeguamento alle superfici dentali opposte

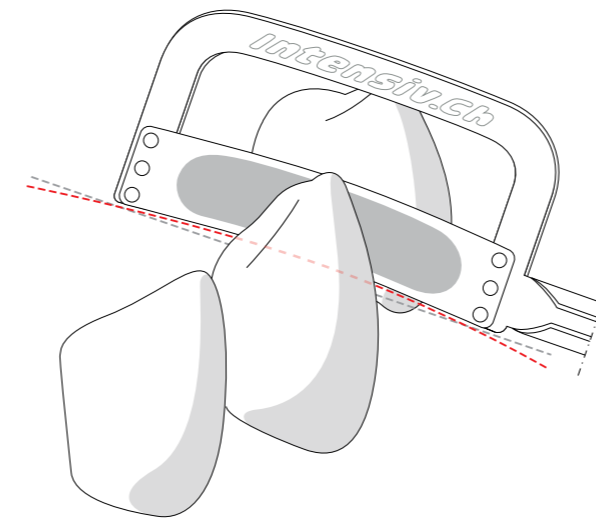

## Indicazioni

- Riduzione, rifinitura e lucidatura dello smalto approssimale in Ortodonzia

## Vantaggi

- Introduzione facilitata tra i punti di contatto interdentali
- Prevenzione della formazione dei gradini cervicali
- L'ipersensibilità dentinale non è favorita
- Mantenimento della morfologia originaria equatoriale del dente
- Riutilizzabile


## Intensiv IPR-Distance Control

Strumento manuale in acciaio inossidabile per la misura ed il controllo della distanza creata tra i denti durante la procedura IPR.



## Intensiv Ortho-StripsTray

Tray compatto in acciaio inox con siliconi colorati per lo stoccaggio e la protezione degli strips oscillanti Intensiv Ortho-Strips System.

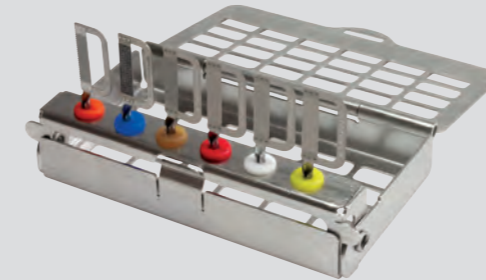

# Intensiv Ortho-Strips® System

Università di Zurigo, Svizzera

Strips diamantati oscillanti per la riduzione, rifinitura e lucidatura approssimale dello smalto in Ortodonzia (IPR)

## Intensiv Ortho-Strips System Double-Sided



- Strips diamantati da due lati
- In 6 granulometrie differenti:
  - 8µm, arancione, Opener, apertura dei punti di contatto
  - 60µm, marrone, Coarse, per la riduzione dello smalto approssimale
  - 80µm, blu, Extracoarse, per la creazione dello spazio, alta efficienza di riduzione
  - 40µm, rosso, Medium, per la modellazione dello smalto approssimale
  - 25µm, bianco, Fine, per la rifinitura delle superfici trattate
  - 15µm, giallo, Polishing, per la lucidatura delle superfici trattate



Riduzione dello smalto e creazione di spazio con Intensiv Ortho-Strips System, Extracoarse, Ref. OS80XC-DS, 80µm

## Intensiv Ortho-Strips System One-Sided



Left

Right

- Strips diamantati da un solo lato
- In 6 granulometrie differenti: 8µm, 40µm, 60µm, 80µm, 25µm, 15µm (come nella versione Double-Sided)
- Disponibili nelle varianti:
  - "L", left (lato sinistro)
  - "R", right (lato destro)



Lucidatura delle superfici trattate con Intensiv Ortho-Strips System, Polishing, Ref. OS15POL-DS, 15µm

## Intensiv Swingle®

Testato clinicamente dalle Università di Zurigo e Berna, Svizzera. Contrangolo reciprocante per l'utilizzo di Intensiv Ortho-Strips System.



- 2 funzioni in un solo contrangolo con micro-mecanismo duale attivato da un pulsante sul retro della testina, per scegliere tra posizione assiale fissa o rotazione assiale libera di Intensiv Ortho-Strips System
- 20.000 oscillazioni/minuto
- Disponibile senza o con luce integrata
- 2 anni di garanzia
- Sterilizzabile