

Intensiv Perio Set

Diamantinstrumente für die Unterstützung der Odontoplastik und die mechanische Wurzelglättung

Die wichtige Massnahme in einer Parodontitisbehandlung ist die Reinigung und Politur der Wurzeloberfläche. Plaque sowie der Zahnstein und endotoxinhaltige Zementschichten, müssen restlos entfernt werden.








Produktbeschreibung

- Die größeren 75 µm Instrumente dienen allein der Odontoplastik
- Die feinkörnigen 40 µm Instrumente werden zur Depuration der Wurzeloberflächen verwendet
- Die 15 µm Instrumente werden für die abschliessende Wurzelfeinglättung verwendet

REF 045, Intensiv Perio Set.
Alle Intensiv Perio Instrumente sind erhältlich in Packungen zu 1, 3 oder 6 Stück

Farbcode	Mikron	Beschreibung
524	80 µm	Medium
514	40 µm	Fine
504	15 µm	Extra fine

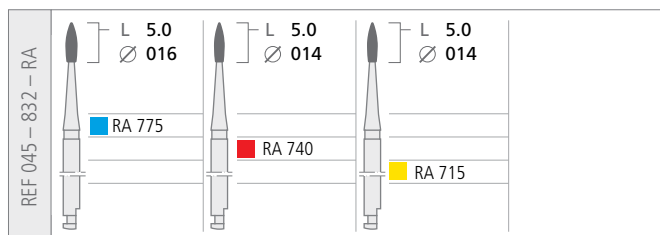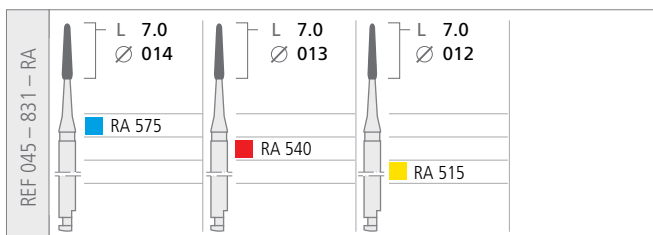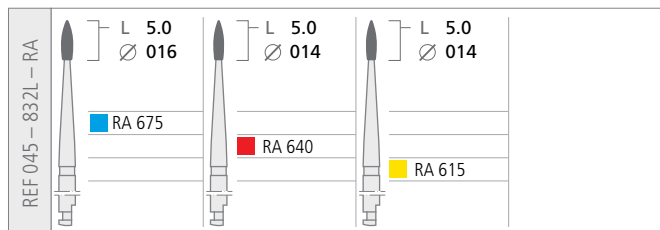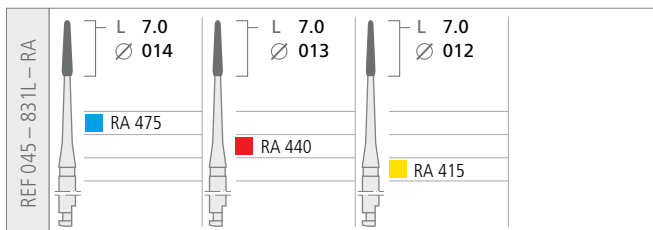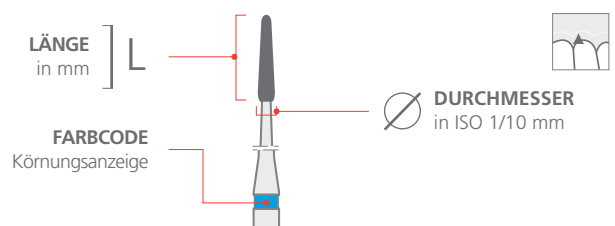

Indikationen

- Mechanisches Entfernen der Konkremente
- Wurzelfeinglättung
- Odontoplastik

Vorteile

- Glatte und homogene Wurzeloberflächen

Prof. K. H. Rateitschak,
Universität Basel, Schweiz

