

Intensiv Rockle

Neu

Winkelstück mit kraftvollerem Drehmoment für FG-Instrument.

Für das effiziente Schleifen und/oder Trennen von Zirkonoxidkeramik oder ähnlich harten Dentalmaterialien werden besonders stabile und resistente FG-Instrumente wie die Intensiv ZirconCut benötigt. Um die Schleifleistung der Instrumente zu erhöhen wurde Intensiv Rockle entwickelt. Die Intensiv ZirconCut schleifen mit höheren Drehmoment als übliche Winkelstücke. Zusätzlich ist das FG-Spannsystem verbessert, um den Halt der beanspruchten Instrumente zu gewährleisten.

Produktbeschreibung

ROTRING-WINKELSTÜCK INTENSIV ROCKLE

Intensiv Rockle ist ein spezielles Rotring-Winkelstück mit standardisierter ISO-Kupplung, Wasserspray und integriertem Licht. Einzigartig ist die robustere interne Mikromechanik.

- Übersetzung 1:4, max. 160.000 rpm/min
- 3 grosse Wasserspraykanülen, Kapazität >50ml/min.
- Längeres FG-Spannsystem als übliche Winkelstücke
- Vergrößerter schwarzer Druckknopf zum leichteren Lösen und Spannen der Instrumente



Grosser schwarzer Knopf



Roter Ring, 1:4



REF WK-900 LT



Film Intensiv Rockle Anwendung


Indikationen

- Anspruchsvolles Schleifen oder Trennen von Zirkonoxidkeramik oder gleichwertigen Materialien

Vorteile

- 20% stärkeres Drehmoment
- Erhöhte Belastbarkeit und besserer Halt der Instrumente
- Verringerte Vibration und Geräuschentwicklung zu üblichen Winkelstücken
- Höhere Spüleistung der Instrumente und verbesserte Kühlung

Klinische Abbildungen

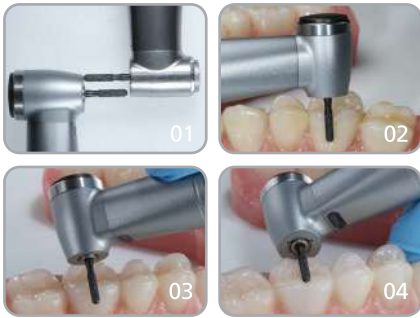

Dr. Alessandro Devigus - Bülach, Schweiz

- 01 Instrumententiefe im Vergleich zu konventionellen Winkelstücken
- 02 Bukkales Kronentrennen
- 03 Koronales Kronentrennen
- 04 Okklusales Kronentrennen



Intensiv Rockle, REF WK-900 LT

Intensiv ZirconCut Prosthetics

Spezial-Diamantinstrumente für effizienteres Trennen von Zirkonoxidkeramik-Restaurationen

Die Intensiv ZirconCut Instrumente (s. Seite 30) sind für die Anwendung mit Intensiv Rockle besonders gut geeignet. Rascheres Trennen und Schleifen von Zirkonoxidkeramik mit der Kombination Intensiv ZirconCut / Intensiv Rockle. Zwei Produkte mit überragender Leistung ergeben eine potenzierte Leistung.

Vorteile

- Trennt Zirkonoxidkeramik signifikant schneller
- Längere und konstant höhere Schleifleistung der Instrumente
- Wissenschaftliche Studie an der Zahnklinik der Universität Zürich

